



Colchão Hospitalar Dinâmico Artemis

Sistema dinâmico específico



Desenvolvido para pacientes com muito alto risco, este sistema de terapia multi oferece terapia alternada para alívio de pressão eficaz, pressão baixa constante para reduzir as pressões de pico, o modo de pulsação para suportar o fluxo de sangue periférico e os modos de inflar máximo. A combinação de terapias. Artemis é a melhor flexibilidade para atender aos diversos tipos de pacientes nos ambientes de UTI, unidade de internação ou em home care ou clínicas.

Artemis:

**DYN/DIG/ARTEMIS/BRAZIL/230 ou
DYN/DIG/ARTEMIS/BRAZIL/110**

Características básicas:

- 2 células alteram a terapia de pressão dinâmica, sistema de substituição total
- Projetado para risco alto / muito alto (conforme definido pelo protocolos de EPUAP E NICE)
- Ajuste de pressão totalmente automático - reage imediatamente as alterações de peso e posicionamento do paciente
- Fácil de usar o sistema de controle digital acionando: Alternando, Pressão Baixa constante, Pulsação e Modo de Inflar Máximo
- Sistema de colchão Zoned para resultados ótimos - Células estáticas na cabeça e células estreitas no calcanhar
- Células do calcanhar especialmente projetadas, mais estreitas e garante a máxima flutuação do calcanhar
- Construção com 8 células; Sub celular permanece inflado para reduzir o risco de "tocar fundo"
- Alerta de saída do paciente - alertar ao cuidador quando nenhum peso do paciente é detectado no colchão
- O modo de assento automático permite que o colchão sseja perfilado na posição vertical
- Compressor duplo para inflar rapidamente e despressurizar rapidamente no momento de PCR
- Capa elástica à prova d'água / vapor zíper protegido em 360°
- Visor com indicação visual do peso (apenas para orientação)
- Função de transporte fácil de usar - simplesmente desligue o conjunto do tubo
- Controle de conforto- permiti um conforto para pacientes individuais sem comprometer o desempenho
- Gerenciamento de cabos - reduz o risco de perigo durante o transporte
- Peso máximo para paciente com 250 kg

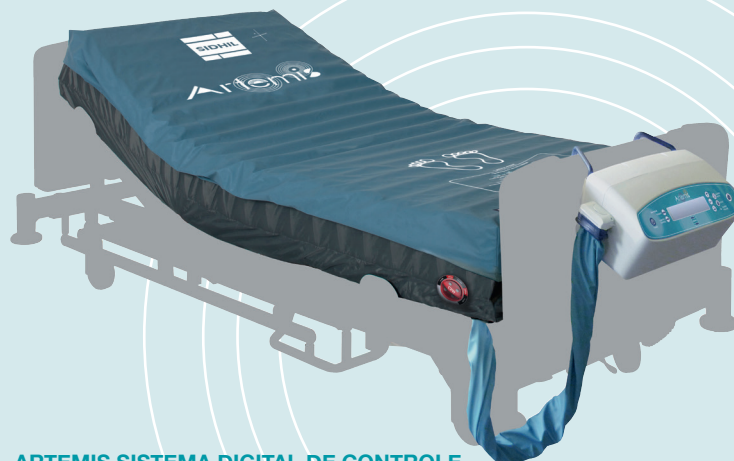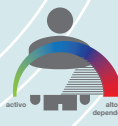

ARTEMIS SISTEMA DIGITAL DE CONTROLE



MODELOS DE TERAPIA

Alternando:

Altera as células A e B ao longo de 10 minutos.

Pressão baixa constante:

O peso do paciente é distribuído uniformemente através das células. Esta opção pode ser para crianças com baixo peso / pediátrica e pacientes que não toleram o movimento.

Pulsação:

As células dinâmicas se movem com movimento pulsante para dar um efeito de ondulação, estimula os capilares e fluxo sanguíneo.

Inflar o máximo:

Para procedimentos como mudança de decúbito e transferência do paciente, o colchão automaticamente para voltar à modo dinâmico após 10 minutos.

Comprimento:	Largura:	Altura:
198	88	20

Códigos dos acessórios:

Capa de substituição para sistema de colchão dinâmico ARTEMIS.	ARTEMIS/MAT/COVER/BRAZIL
Unidade de controle de substituição para o sistema ARTEMIS, 230V.	ARTEMIS/PUMP/BRAZIL/230
Unidade de controle de substituição para o sistema ARTEMIS, 110V.	ARTEMIS/PUMP/BRAZIL/110



...faz o melhor

Distribuidor Exclusivo no Brasil



www.strattner.com.br

Entre em contato com o nosso time de vendas:

SP: (11) 2185 2300 / RJ: (21) 2121 1300

Artemis/REV 8 BR - 16/02/17



Trabalha melhor com a pressão Opções de cuidado da Sidhil

A redução da prevalência de úlceras de pressão não é só papel vital na melhoria dos resultados dos pacientes, mas também os custos associados ao tratamento - estimados entre £1,4 e £ 2,1 bilhões por ano para o NHS. (1)

Os dados de 2013 sugerem que a taxa de prevalência de úlceras de pressão no ambiente da saúde foi de 4,7% (1). Os custos diários de tratamento de uma úlcera por pressão são estimadas entre 43 e 374 libras, independentemente do que foi a causa. Mesmo para as úlceras sem complicações, o custo diário varia de £ 43 a £ 57 (2).

Agudo

Home care

Residência/
Comunidade

Apoia aos clientes em todos os setores da saúde, Sidhil continua a investir na introdução de novas e melhores produtos para o mercado do cuidado. Nosso mais recente portfólio de colchões dinâmicos são projetados em torno de procedimentos atuais de enfermagem, Fornecendo soluções completas e abrangentes desenvolvidas para auxiliar na redução da incidência de úlceras de pressão, melhorando os resultados dos pacientes e contribui ara aliviar a pressão sobre os orçamentos de saúde.

Fazer o melhor para reduzir a prevalência de úlcera por pressão



SERVIÇO DE MAPEAMENTO DE PRESSÃO E CONTÍNUO EM CAMA
SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO AGORA DISPONÍVEIS

Selecionar o produto certo a cada exigência individual é um passo importante para redução e gestão da prevalência da úlcera por pressão. Sidhil concentrou-se no desenvolvimento de uma ampla gama de produtos para os cuidados da pressão, todos os quais têm sido para ajudar os médicos e os cuidadores na escolha adequada do produto para garantir ótimos resultados.

Fazer o melhor para o paciente



PACIENTE

A nossa extensa gama de colchões dinâmicos e almofadas foram destinada para cobrir todas a todos os riscos de alta a muito alta, através gestão do risco de cuidados definidos pelas diretrizes EPUAP e pelo NICE.

Fazer o melhor para os médicos e cuidadores



Enfermeira / Cuidador

Fornecer acesso para um amplo range de sistemas de cuidados de pressão combinando exata performasse e confiabilidade máxima com benefícios clínicos definidos, a área da Sidhil responsável por esses produtos, desenvolve segurança e conforto para todo o grupo de pacientes com níveis de risco, assegurando aos médicos e cuidadores de conhecimento para proteger e suportar seus pacientes.

Fazer o melhor preço



Finança

Com o foco em entregar uma contribuição para o atendimento da ulcera por pressão em todos os ambientes, Sidhil fornece soluções de valor para combinar com todos os orçamentos.

(1) Informações do Health Service Thermometer, abrangendo casas de repouso, casas de cuidados, prestadores de cuidados independentes do sector, enfermarias e hospitais.

(2) Bennett, Dealy e Posnett, 2012

Sempre fazer o melhor para o cuidado do paciente e conforto

Artemis colchão dinâmico totalmente automático multifuncional para paciente com muito Alto Risco até e incluindo a úlcera de pressão de Grau IV, através da redução da pressão estática colchões. Sidhil oferece sistema específico, para proteger os pacientes mesmo durante períodos de uso prolongado.

Muitos dos nossos sistemas oferecem configurações de conforto que podem ser gerenciado tanto pelo paciente ou por médicos e cuidadores, reduzindo o estresse e melhorar o bem-estar. A redução da necessidade de movimentação e manuseio também contribui para redução da carga de trabalho.

Contratos de Manutenção - Preventiva e Corretiva

A manutenção programada é a melhor forma de contribuir para o gerenciamento de riscos por falhas e paradas.

Contamos com modalidades de contratos adequados com o produto e as necessidades de cada cliente.

Para maiores informações, por favor entre em contato com a nossa Assistência Técnica.

Protocolos para úlceras por pressão

Excelente cuidado com a pele é um atributo de qualidade do cuidado. Prevalência de lesão da pele e úlcera por pressão tornou-se um padrão pelo qual os hospitais são avaliados e reconhecidos como um problema de segurança internacional.

A maioria das lesões por pressão são evitáveis se medidas apropriadas forem implementadas. A prevenção envolve a avaliação contínua dos riscos de todos os pacientes, Estratégias de prevenção, incluindo a inspeção da pele e reposicionamento em intervalos regulares, análise dos fatores causais em caso de lesão por pressão desenvolvimento e a seleção de dispositivos adequados para aliviar a pressão. (3) A Sidhil oferece uma vasta gama de sistemas para todos os estágios de cuidados.

Estágio 1

(Sistema estático - até alto risco)

Utilizando espuma elástica e viscoelástica, contorno individual para conforto e apoio, fornece redução de pressão ideal.



ACCLAIM VE/PROFILER

Estágio 2

(Sistema híbrido - até alto risco)

Sistema híbrido não motorizado que utiliza uma combinação de ar células e espuma para alcançar a ideal redução de pressão.



ACCLAIM FLOW

Estágio 3

(Médio/alto risco)

2 células alteram a terapia dinâmica de pressão por sobreposição Sistemas de substituição de colchões



EROS/THEIA

Estágio 4

(Médio/alto risco)

2 ou 3 células alteram a pressão dinâmica total Sistema de substituição do colchão



ATLAS

Estágio 5

(Alto risco)

2 células alteram a pressão dinâmica da terapia total do colchão, sistema com ajuste automático determinada pelo peso do paciente e posição



APOLLO/ARES

Estágio 6

(Alto/Muito alto risco)

Sistema de terapia dupla que proporciona terapia alternada para um alívio efetivo da pressão e baixa pressão para reduzir as pressões de pico



ARTEMIS/ATHENA