

klare[®]

Nova

Lavadora Ultrassônica KL35

Conheça a excelência em cada detalhe com o novo lançamento da Klare: a Lavadora mais completa do mercado.



Ref.: 1.01.07006

KL35

Um novo conceito em lavadoras ultrassônicas

Totalmente automatizada, com duas entradas de água, sendo uma exclusiva para enxágue com água de osmose, dosagem de detergente, desgaseificação e drenagem.



| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
| DESGASEIFICAR | | 55 ml DETERGENTE | | | INICIAR |
| 45 °C TEMP. ÁGUA | 10 min TEMPO LIMPEZA | 10 s TEMPO DE JET | | | |
| DRENO | | ENXÁGUE | | | |

Exibe na tela inicial todos os parâmetros do ciclo selecionado sem precisar acessar a programação.

Tela touch screen em cores, com animações durante o ciclo.

INSIRA A SENHA DE SUPERVISÃO
4 3 2 1



| | | |
|----|---|----|
| 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 |
| AC | 0 | OK |

Permite edição dos parâmetros do ciclo, com senha de administrador.



Cesto com engate rápido que facilita o manuseio com os materiais.

| | | | |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROGRAMA 1 | | | |
| | 70 °C TEMPERATURA PROGRAMADA | <ul style="list-style-type: none"> · ABASTECER · DESGASEIFICAR · DOSE DETERGENTE · AQUECER ÁGUA · LAVAGEM · ENXÁGUE <input checked="" type="checkbox"/> · DRENAGEM | |
| | 30 °C TEMPERATURA ATUAL | | |
| AQUECENDO | | | |

Sistema de aquecimento Fast – otimiza o aquecimento da água 2x mais rápido do que o usual.


Rastreabilidade e Conectividade

Sconnect



Possui impressora embutida e sistema inteligente de rastreabilidade exclusivo S.Connect®, que permite armazenar as informações dos ciclos realizados e ainda as informações do equipamento.

Engenharia Clínica

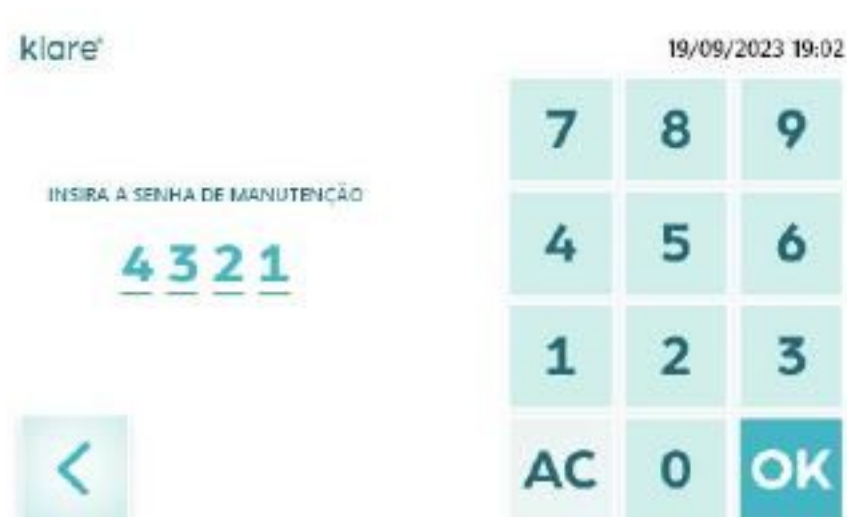

Além de fácil acesso pensado para manutenção, possui área exclusiva para engenharia clínica, com as informações e testes indispensáveis para manutenção preventiva e corretiva.

Características técnicas

| Nome comercial | KL35 |
|-------------------------|--------------------------|
| Gabinete | Aço inox 304AISI |
| Cuba | Aço inox 316AISI |
| Dimensões externas | 741 x 471 x 466mm |
| Dimensões da cuba | 625 x 305 x 210mm |
| Capacidade total | 40 litros |
| Capacidade útil | 27,5 litros |
| Transdutores | 12 |
| Frequência ultrassônica | 40 KHz |
| Programas | 5 ciclos programáveis |
| Saídas de canulados | Até 14 com adaptadores Y |
| Aquecimento | Até 65°C |
| Alimentação | 220v |
| Registro ANVISA | 10302869014 |

klare[®]

SOLUÇÃO EM CME

Distribuído por: H.Strattner & CIA LTDA
Av. das Águias - 228 - Cidade Universitária Pedra Branca
Palhoça - SC - 88137-280
www.strattner.com.br